

マグチタン バレット

取扱説明書



- 汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
- ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤は、使用しないでください。

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉

are Quest

製造販売元 株式会社アーク・クエスト
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
☎ 0120-080-523 <http://www.arc-q.com>

MA01_R02

■「マグチタン」は医療機器です。


「マグチタン バレット」は医療機器として認証されています。
両サイドに100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。

■ 純チタン採用

本体は純チタン採用で、とても軽い着け心地。
純チタンは汗や水に強く、錆びにくいので、スポーツシーンでも安心してご使用いただけます。
「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。


※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

■ 製品仕様

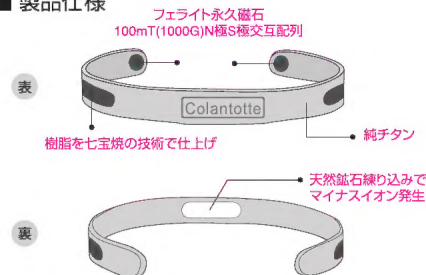


Spec: フェライト永久磁石(異方性)
100mT(1000G)2個を交互配列
Material: 純チタン、樹脂、天然鉱石
Size: M13~16cm・L16~19cm 幅7.8mm
医療機器認証番号: 221AGBZX00162000

■ 独自のN極S極交互配列

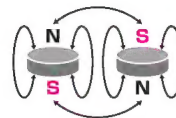


N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントットの磁気パワーの特長です。

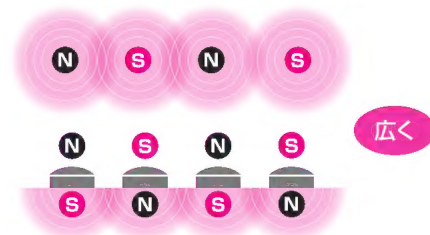

■ サイズ調節が出来ます

サイズ調節(大きくするとき)

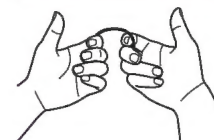

- 両手の人差指と中指で軽く広げます

サイズ調節(小さくするとき)



- 適度な力で握り、装着部位のサイズに合わせます

装着の仕方



- 横から装着します

※上記の方法でサイズ調節後、装着部位にフィットさせてご使用ください。